


# Procédure de Connexion – PACS Synapse – Irm de Saintes – Windows Vista

## Pré-Requis


- Avoir Internet Explorer 6 ou 7 ou 8
- Avoir les droits administrateur sur la machine au moment de l'installation

## Modification Obligatoire sous Windows VISTA


- Allez sur Démarrer->Panneau de Configuration
- Faites un click gauche sur « **Comptes d'utilisateurs et protection des utilisateurs** »

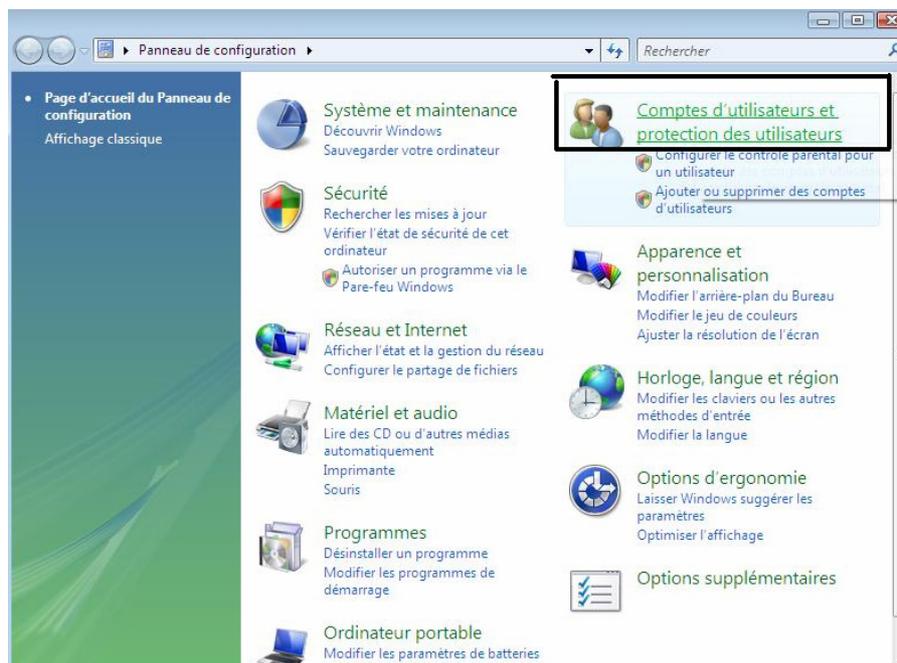

- Puis faites un click gauche sur « **Comptes d'Utilisateurs** »

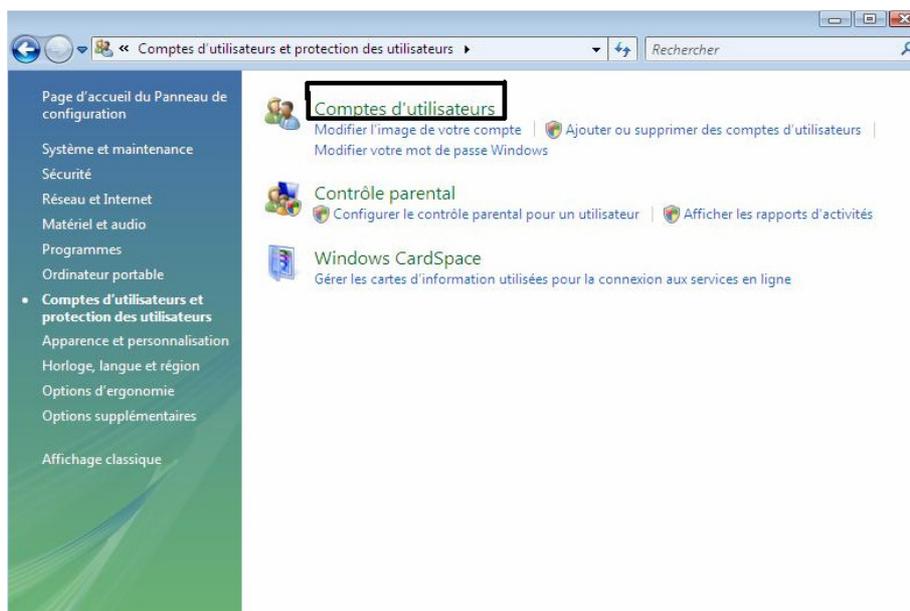

- Faire un click gauche sur « **Activer ou désactiver le contrôle des comptes utilisateurs** »

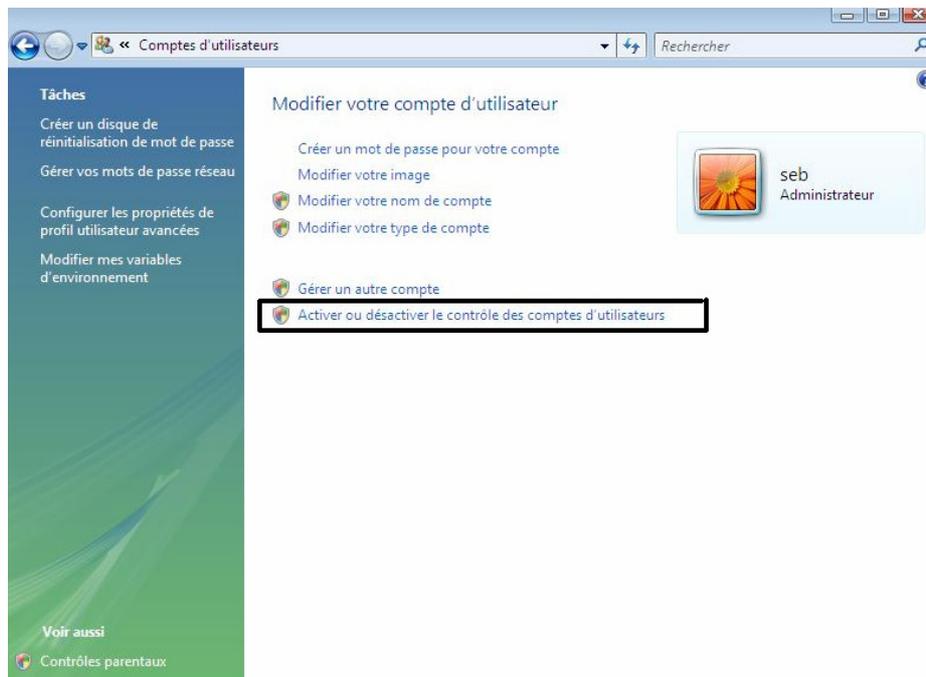

- Décochez la case « **Utiliser le contrôle des comptes utilisateurs pour vous aider à protéger votre ordinateur** »

Activer le contrôle des comptes d'utilisateurs pour sécuriser davantage votre ordinateur

Le Contrôle de compte d'utilisateur peut aider à empêcher les modifications non autorisées sur votre ordinateur. Nous vous conseillons de laisser le Contrôle de compte d'utilisateur activé afin de mieux protéger votre ordinateur.

Utiliser le contrôle des comptes d'utilisateurs pour vous aider à protéger votre ordinateur


OK

Annuler


- Faites **OK**
- Faites « **Redémarrer Maintenant** »

## Déclaration du Serveur en Sites de Confiance dans Internet Explorer


- Faites Démarrer->Panneau de Configuration
- Faites un click gauche sur « Réseau et Internet »

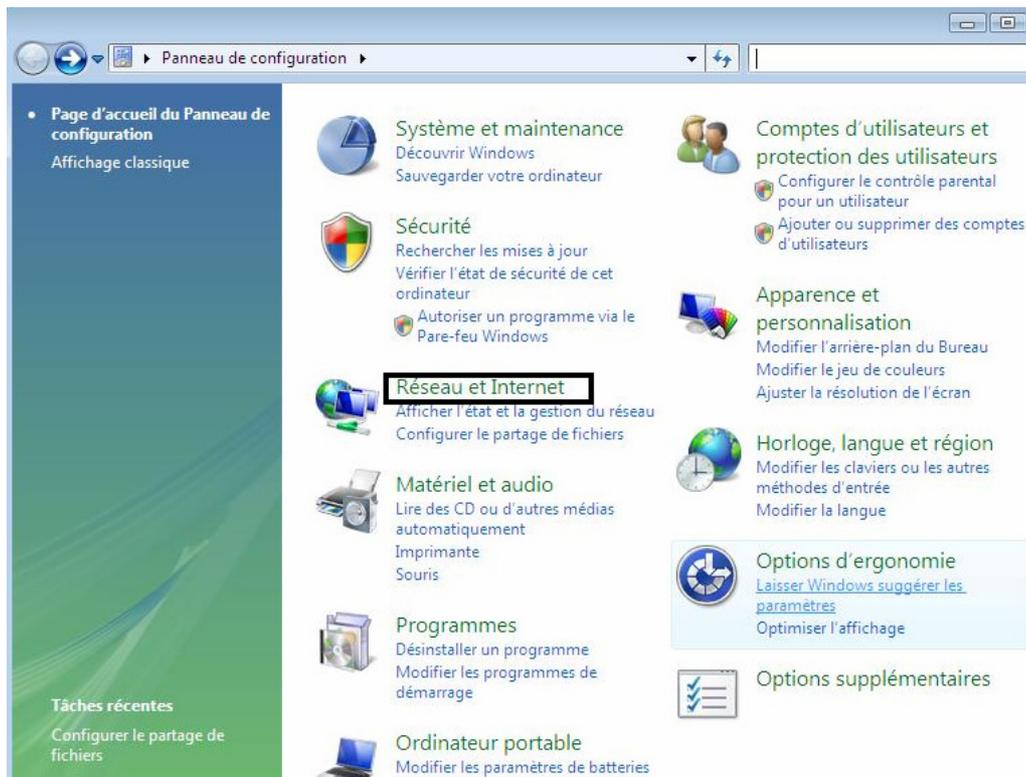


- Faites un click gauche sur « Options Internet »

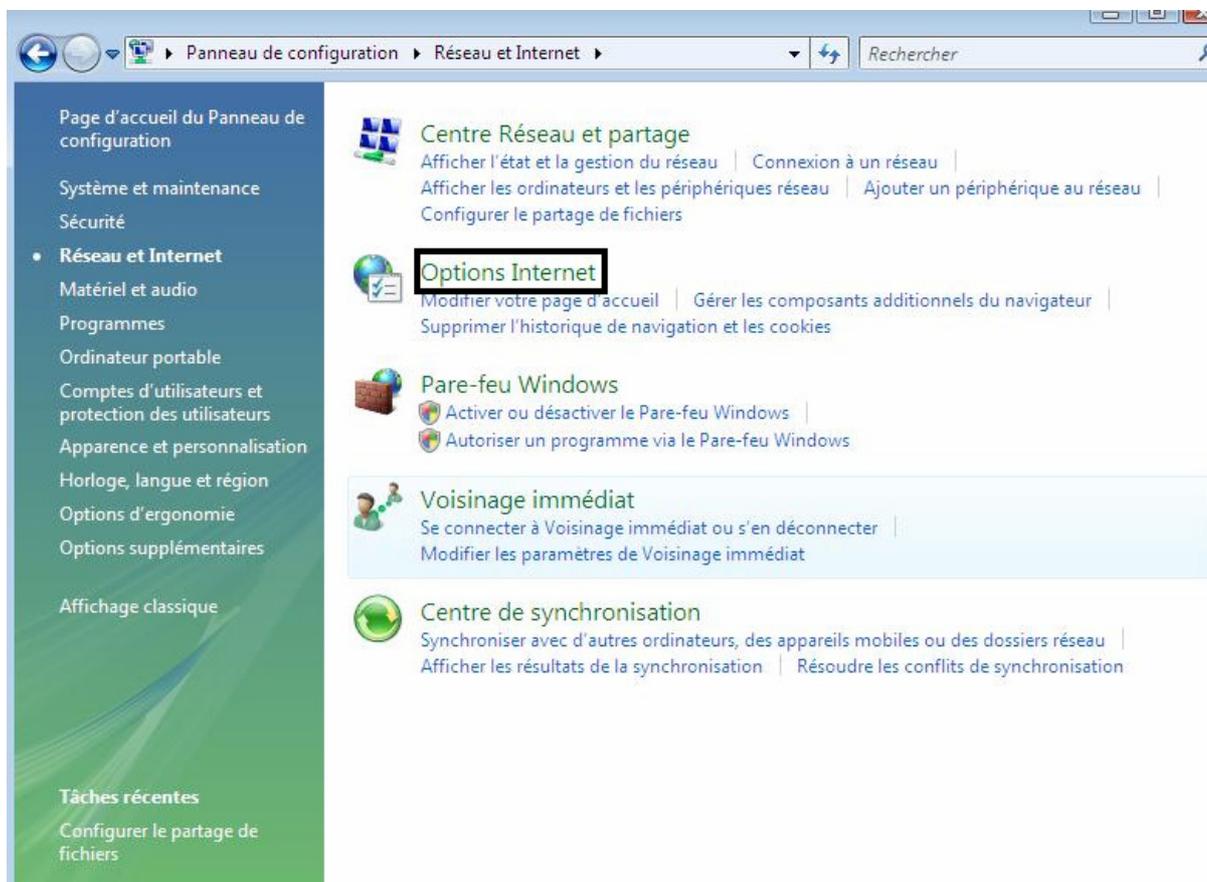


- Onglet **Sécurité** puis **Sites de Confiance**

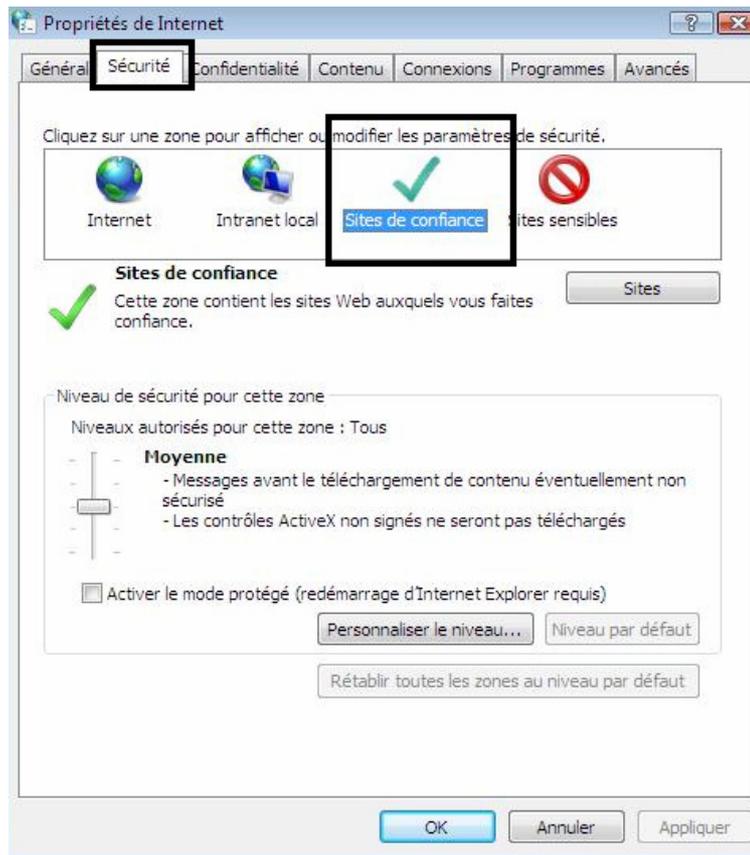

- Appuyez sur le bouton **Sites**
- En dessous de « **Ajouter ce site Web à la zone** », entrez **https://www.irmdesaintonge.com** puis faites **Ajouter**
- Appuyez sur « **Personnaliser le Niveau** » tout en étant toujours bien sur « **Sites de Confiance** »

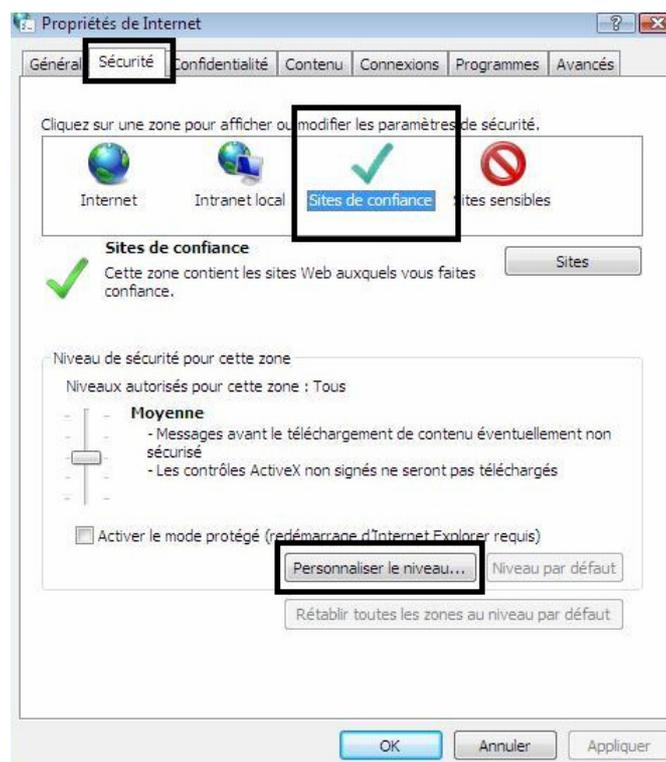


- Dans la section « **Authentification Utilisateur** » puis **Connexion**, cochez la case « **Demander le nom d'utilisateur et le mot de passe** »

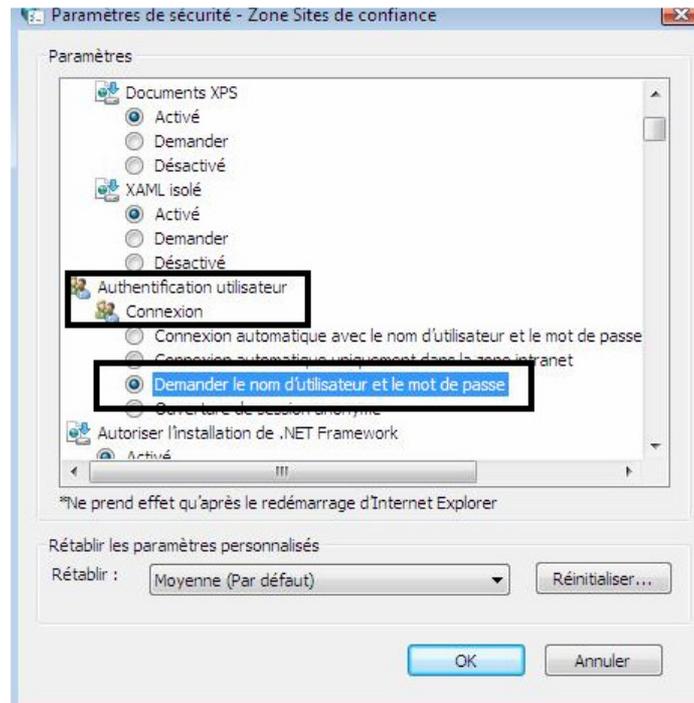

- Faites OUI au message « **Voulez vous vraiment modifier les paramètres de cette zone** »
- Faites **OK**
- Puis de nouveau **OK**

## Installation de Synapse version 3.2.1.228

- Dans la barre d'adresse tapez alors <https://www.irmdesaintonge.com>
- « **Poursuivre avec le site web** »
- Entrez vos identifiants Synapse
- Cette fenêtre apparait alors

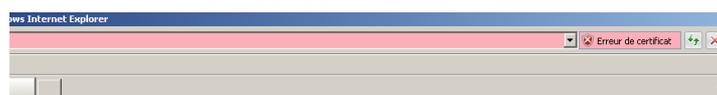

### **Station de travail Synapse**


Fuji Médical Systèmes France



- Appuyez alors sur le bouton **Synapse Workstation Code Download**



- Si un bandeau jaune apparait en haut de l'écran, faites un click gauche dessus et choisissez « **Installer le Contrôle Active X** »
- Faites « **Installer** » à ce message et ce à chaque fois que vous l'aurez

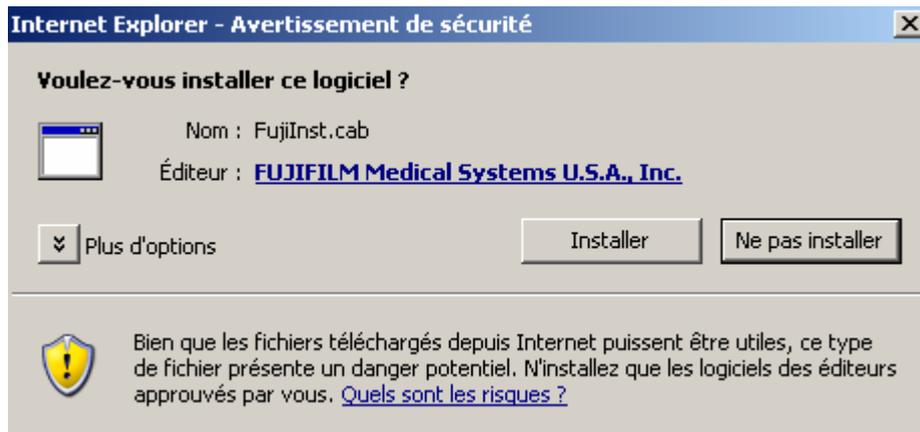


- Patientez le temps que l'installation se fasse
- Quand vous avez le message « **L'installation de la version 3.2.1.228 a réussi** », fermez la fenêtre Internet Explorer
- Vous avez à présent un icône Synapse sur votre bureau.




## Réglages de Synapse avant Utilisation

- Faites un click droit sur l'icône Synapse
- Choisir « Propriétés »
- Tapez vos identifiants
- Cochez les cases comme ci-dessous :

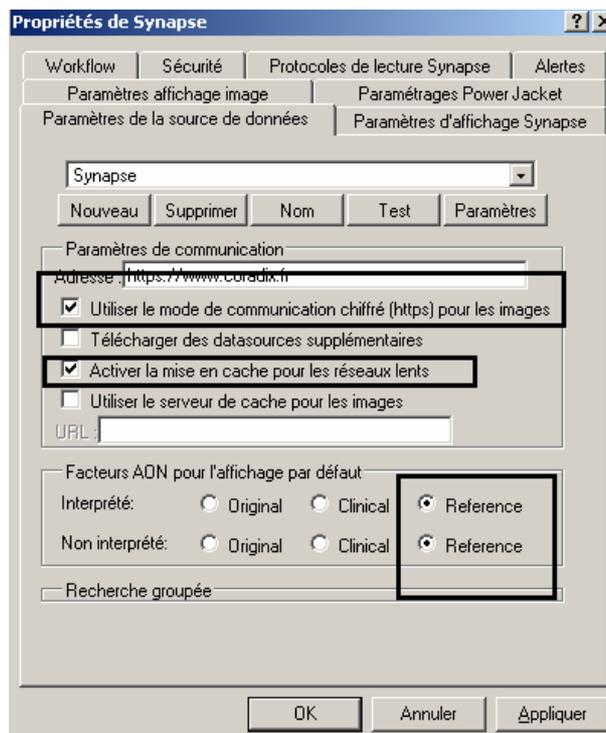

- Dans l'onglet « sécurité » décocher les 2 cases d'en bas pour éviter la déconnexion de l'utilisateur si vous êtes sur un ordinateur utilisé par vous-même.

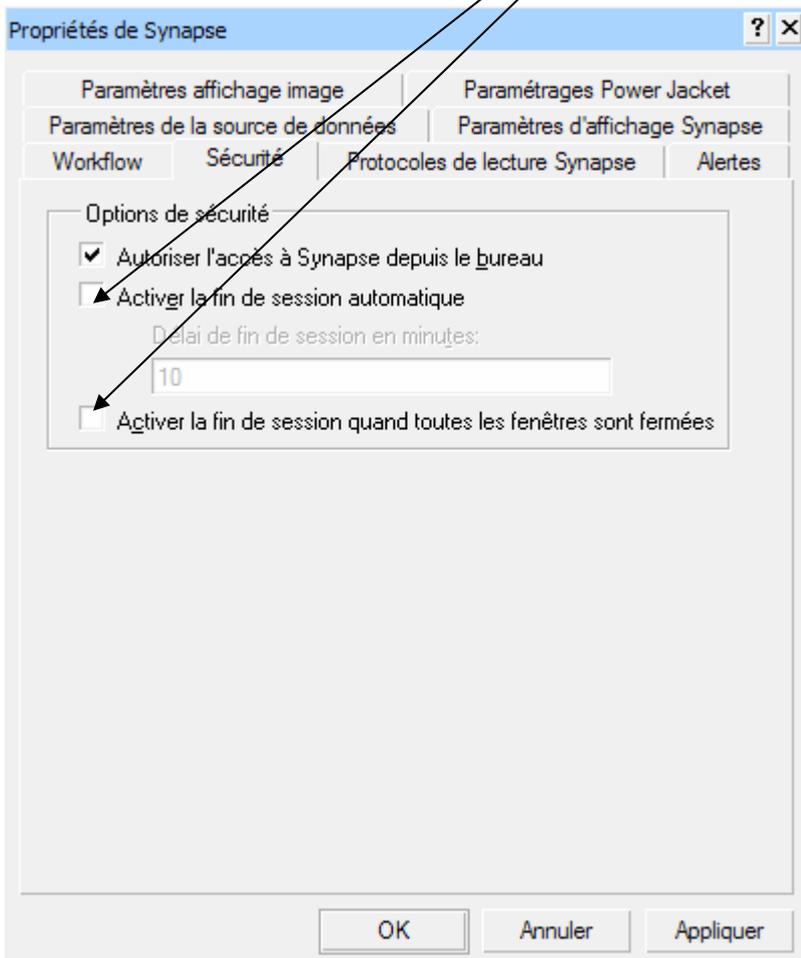

- Faites Ok
- Faites un double click sur l'icône Synapse et identifiez vous
- Naviguez dans Synapse pour visualiser vos images